

Mode d'emploi CoaguChek® XS Plus

Pour effectuer une mesure chez un patient

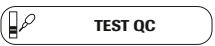
	a) Sélectionner  TEST PATIENT dans le menu principal - avec option «identification du patient» Introduire l'identité du patient par nom ou numéro sur le clavier de l'écran - sans option «identification du patient» Affichage de l'icône pour l'introduction de la bandelette
	b) Après l'affichage de l'icône pour l'introduction de la bandelette introduire la bandelette avec l'inscription «CoaguChek® XS PT» vers le haut. (Si un nouveau lot de bandelettes est utilisé, la nouvelle puce codée doit être introduite au plus tard maintenant)
	c) L'icône du sablier indique le pré-chauffage de la bandelette
	d) Lorsque la température de mesure est atteinte l'icône de la goutte indique que l'appareil est prêt pour la mesure. La goutte de sang (10 µl) peut être déposée sur la bandelette dans les 120 sec. qui suivent ce signal.
	e) Piquer le bout du doigt dès que l'icône de la goutte est affiché et déposer la goutte de sang dans les 15 sec sur la bandelette, suivant une de ces 3 possibilités: 1. déposer la goutte directement du doigt sur le champ d'application en forme d'hémicycle transparent 2. toucher la bandelette avec la goutte de sang sur le coté à la hauteur du champ d'application 3. appliquer la goutte de sang avec un capillaire CoaguChek®
	f) Dès que la quantité de sang est suffisante (10 µl) l'icône du sablier s'affiche et la mesure débute
	g) le résultat est indiqué dans l'unité sélectionnée et sauvegardé
	h) retirer la bandelette et éteindre l'appareil
	Domaine de mesure : INR: 0.8 – 8.0 %Q: 5 – 120 SEC: 9.6 – 96

Pour effectuer un contrôle de qualité interne

1. Diluer la solution de contrôle de qualité

- Préparer le flacon avec la pipette et la puce codée
- Ouvrir le couvercle du flacon et retirer le bouchon en caoutchouc avec précaution
- Tenir la pipette par la partie mince et l'agiter pour faire descendre tout le diluant.
Couper le plus haut possible et verser tout le contenu dans le flacon.
- Refermer le flacon et le remuer de manière rotative jusqu'à ce que le lyophilisat soit complètement dissout.
La solution de contrôle est prête à l'application

2. Effectuer le contrôle de qualité

	a) Appuyer la touche marche/arrêt – le menu principal est affiché
	b) Sélectionner 
	c) introduire la bandelette, l'inscription «CoaguChek® XS PT» placée vers le HAUT (si un nouveau lot de bandelettes est utilisé, la nouvelle puce codée doit d'abord être introduite)
	d) La solution de contrôle contient aussi une puce codée !! - Si le numéro de puce codée correspond, veuillez la sélectionner - Si le numéro de puce codée n'est pas encore existant, sélectionner  retirer la puce codée des bandelettes et remplacer par la puce codée de la solution de contrôle
	e) l'icône du sablier indique le pré-chauffage de la bandelette
	f) Au moment où l'icône de la pipette clignote l'appareil est prêt pour la mesure
	g) Appliquez la solution de contrôle avec la pipette en plastique dans les 20 sec.
	h) Le résultat est affiché avec la marge de tolérance
	i) Retournez au menu principal.
Remarque:	Pour effectuer un <u>contrôle de qualité externe</u> , veuillez procéder <u>comme pour une mesure chez un patient</u> et non comme un contrôle interne.